




Corset anti-cyphose

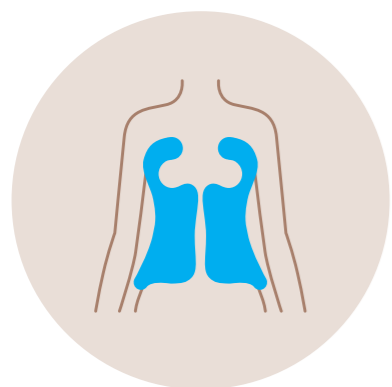

A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison du corset, fait sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Introduction

Le corset anti-cyphose sur mesure, fabriqué à la suite d'une prescription médicale, est un dispositif servant à lutter contre la cyphose.

Mise en place

- Ouvrir le corset avec les 2 mains et le placer derrière le dos ou sur le côté.
- Enfiler le corset.
- Se coucher sur le dos avec les genoux fléchis.
- Ajuster le corset avec le pince-taille au-dessus des crêtes iliaques comme repères.
- Positionner la partie antérieure sous le corset.
- Bien tirer le t-shirt pour éviter les plis.
- Serrer les velcros jusqu'aux traits de serrage marqués par le technicien orthopédiste.

Suivi

Pour le suivi et les modifications, se conformer aux recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle. Pour toute modification du corset, prendre contact avec GO pour convenir d'un rendez-vous.

Entretien

- Laver le corset une fois par semaine avec un chiffon trempé dans de l'eau savonneuse au pH neutre. Pour des taches plus importantes, il est possible d'utiliser de l'eau de Dakin. Bien rincer avec un chiffon humide et sécher avec une serviette, laisser sécher à température ambiante environ 30 minutes.
- Ne pas utiliser de liquides contenant de l'alcool, de liquides abrasifs, de produits de nettoyage, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.
- Ne pas utiliser de matériaux et/ou produits abrasifs, brosses, laine d'acier, papier en fibre de verre, lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
- Ne pas faire tremper le corset.
- Ne pas le laisser dans un véhicule par forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
- Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques.

Remboursement : prise en charge

Le coût du corset pour les cyphoses pathologiques des patients en croissance qui ont une prescription médicale est pris en charge (frais médicaux) par l'assurance invalidité (AI). Le formulaire de demande de prestation AI se télécharge sur internet. Il est à retourner à la caisse AI de votre canton. Ainsi, le corset et toutes les adaptations ultérieures sont prise en charge à 100%.

Usage incorrect

- Votre corset sur mesure ne peut en aucun cas être porté par une tierce personne.
- A des fins de guérison sans indication médicale.
- Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- Stockage inapproprié.

Conseils

Il est important de prévenir toutes les blessures cutanées (cloques, escarres, rougeurs, etc.). La peau se trouvant en dessous du corset a besoin d'être fortifiée, spécialement à l'endroit où se trouvent les points d'appui.

Soins de la peau

- Prendre quotidiennement une douche ou un bain.
- Une rougeur normale va disparaître après environ 20 à 40 minutes sans corset et blanchir à la pression du doigt.
- Une rougeur anormale ne va pas disparaître, même après une heure sans corset.
- Appliquer un désinfectant en spray type Bepanthen et masser largement avec vos mains toutes les parties de peau couvertes par le corset et spécialement là où subsistent les rougeurs, zones par lesquelles s'effectuent la correction.
- Toujours porter un t-shirt, coutures tournées vers l'extérieur. GO offre le premier t-shirt (voir annexe).
- Ne jamais utiliser de crème, d'onguent ou de talc sous le corset. Ces produits diminuent la résistance cutanée et peuvent être la cause de lésions importantes.
- Si malgré des soins attentifs, une lésion cutanée profonde devait apparaître, abandonner le traitement durant 1 à 2 jour(s) et masser fréquemment la partie cutanée lésée à l'aide d'une crème désinfectante et cicatrisante Bepanthen. Lors de la reprise du traitement avec le corset, poursuivre pendant quelques jours l'application de lotion en séchant bien la peau avant de mettre en place le corset.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS? NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER. T 022 309 48 48

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

- Si le corset est porté d'une manière trop lâche, le frottement de celui-ci sur la peau va augmenter le risque de problèmes cutanés. Porter toujours le corset aussi serré que possible. Souvent, la peau se pigmente au niveau de la taille et des hanches. Ceci n'est pas un problème, car dès l'arrêt du traitement, cette coloration disparaît spontanément.

Physiothérapie : selon recommandations du médecin, afin d'avoir un traitement complémentaire au port du corset.

Activités sportives : il n'y a aucune contre-indication concernant le sport. L'activité sportive sera effectuée en dehors des heures du port du corset.

La réussite d'un corset anti-cyphose

Pour être efficace, le corset doit être adapté à chaque morphologie. Mais cela ne suffit pas : seule une bonne «compliance» permet la réussite du traitement. Autrement dit, pour qu'il soit totalement utile, le corset doit être porté en suivant exactement les indications données par les spécialistes.

Temps de port du corset : temps d'adaptation

1^{ère} semaine / 6 heures par jour

- Mettre le corset 4 heures le matin (la matinée scolaire).
- Quand l'enfant rentre de l'école, enlever le corset.
- S'essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.
- Remettre le corset pendant 2 heures l'après-midi après l'école.
- Après avoir enlevé le corset, s'essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.

2^{ème} semaines / 10 heures par jour

- Mettre le corset toute la nuit et en rentrant de l'école l'après-midi durant 2 heures de temps.

3^{ème} semaines / 16 heures par jour

- Comme la première semaine et le mettre aussi la nuit.

4^{ème} semaine/18 heures par jour

- Porter le corset 18 heures sur 24.

Date de livraison
Technicien

En espérant vous avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions de votre confiance !

Edition 27.10.2020



GIGLIO ORTHOPÉDIE

giglio-orthopedie.ch



Deux forces, une direction


GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch

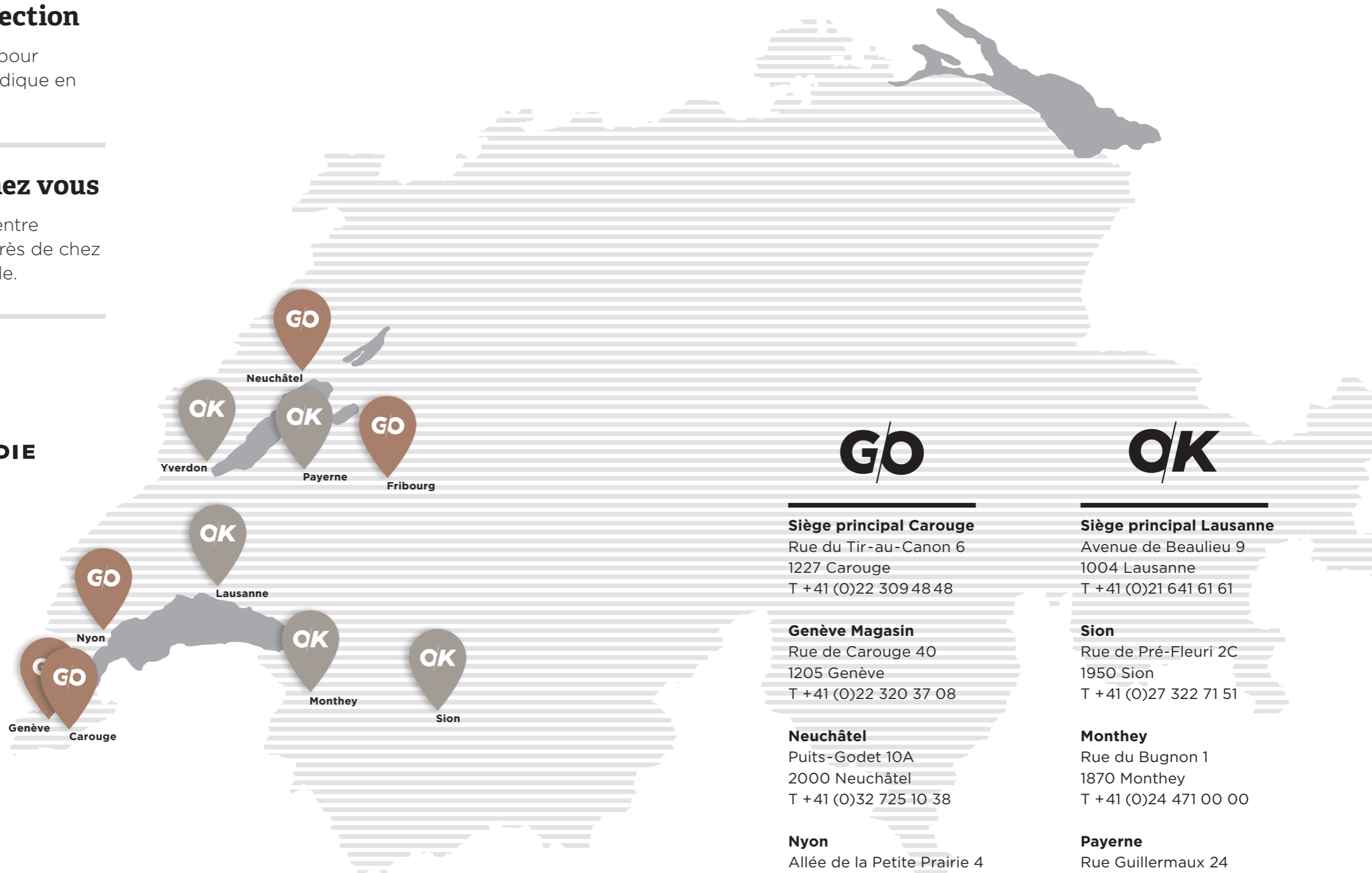

GO
Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



OK
Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

